

# ORCA 指定日使用量集計 CSV 出力システム

Ver-01.00.000

和幸システム株式会社

## はじめに

ORCA 指定日使用量集計 CSV 出力システム（以下、本システムと略す）は、ORCA に入力された請求データを指定日で使用量の集計を行い CSV 出力するシステムです。

## 起動と終了

起動は、プログラムメニューから、ORCA 指定日使用量集計 CSV を起動して下さい。

終了は、メイン画面の終了ボタンをクリックして下さい。


## ライセンスの登録

本システムは、ライセンス登録を行わないと、一定期間経過後は、使用できなくなります。

次の画面が表示されたら、オンライン申請をクリックして下さい。

試用する場合は、あとで登録をクリックして業務を開始して下さい。

ライセンスを登録する場合は、ライセンス登録欄に指定の内容を入力後、ライセンス登録をクリックして下さい。

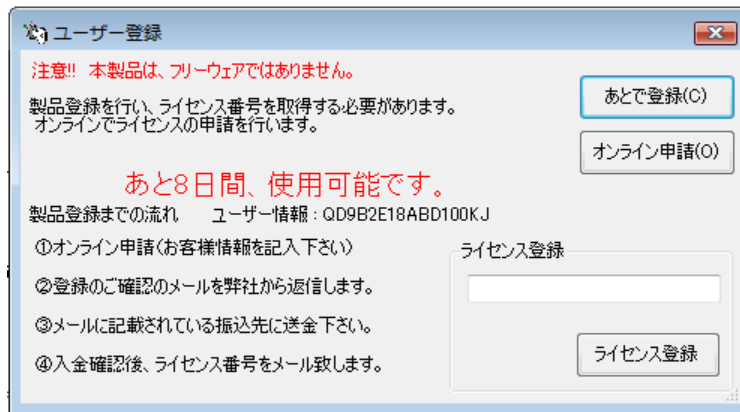

オンライン申請の画面です。インターネット経由で登録画面が表示されますので、必要事項を記入して、送信ボタンをクリックして下さい。

ライセンス登録のご案内メールをお送りしますので、その内容に従って下さい。

### ORCA 指定日使用量集計 ユーザー申請


下記のフォームに入力後、送信ボタンをクリックして申請下さい。購入方法のメールお送り致します。ご入金確認後、購入パスワードを送付致します。個人情報に関しては、当社内で厳重管理し、第三者に公表することはありません。

尚、フリーメールのアドレスでの申請は、お断りしております。

必要項目を入力し、送信ボタンを押して下さい(※の部分は必須項目)	
ユーザー情報 ※	77U9B2E18ABD100QW (このまま変更しないで下さい)
ふりがな ※ 全角ひらがなで指定	<input type="text"/>
ご担当者氏名(漢字)※	<input type="text"/>
E-Mailアドレス ※ 全て半角で指定	<input type="text"/>
医療機関名※	<input type="text"/>
所属	<input type="text"/>
役職	<input type="text"/>
住所※	郵便番号 <input type="text"/> 例) 511-0042 都道府県 <input type="text"/> 選択して下さい 住所 <input type="text"/>

## メイン画面

本システムのメイン画面です。終了ボタンをクリックすると業務を終了します。

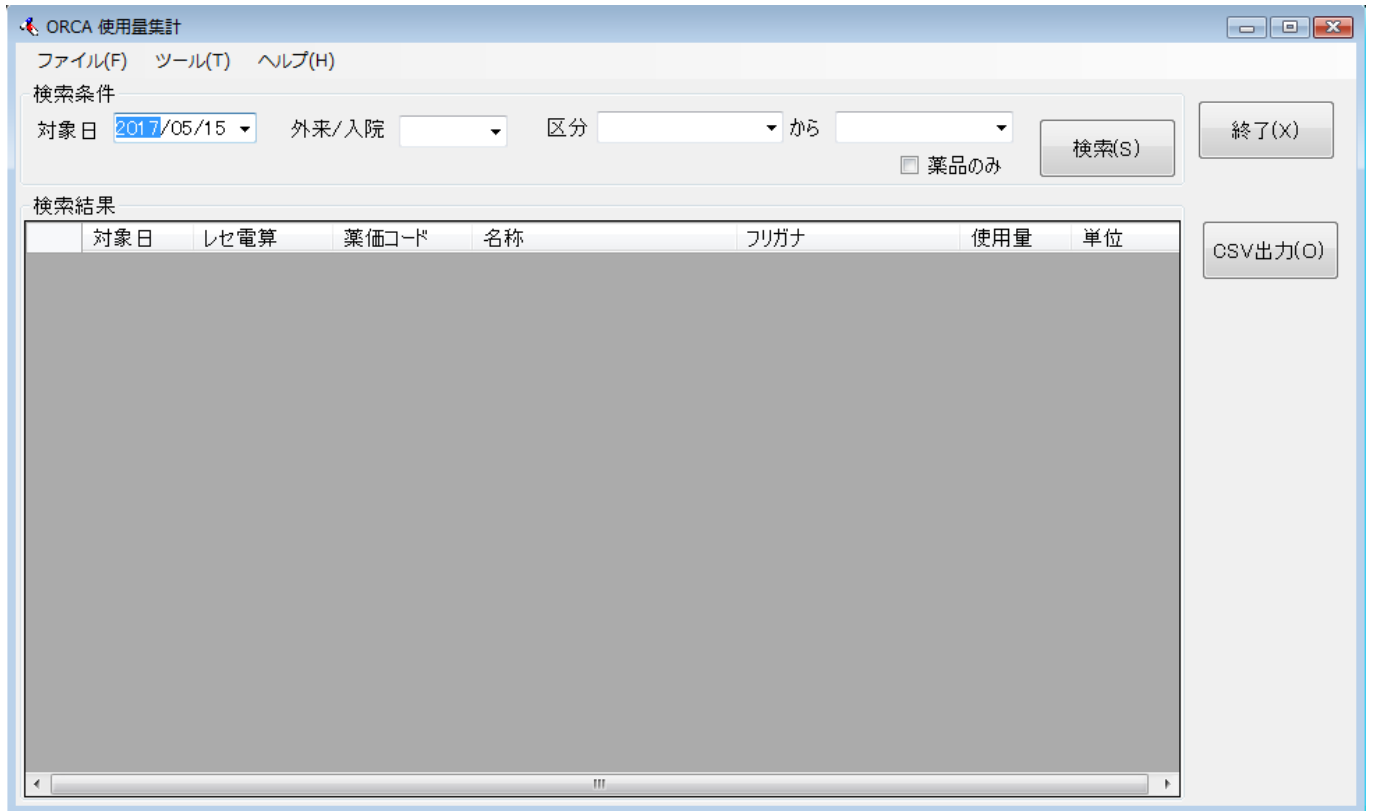


The screenshot shows the main interface of the 'ORCA 使用量集計' (ORCA Usage Statistics) application. At the top, there is a menu bar with 'ファイル(F)', 'ツール(T)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu is the '検索条件' (Search Conditions) section, which includes a date dropdown set to '2017/05/15', a dropdown for '外来/入院', a dropdown for '区分', and a 'から' (from) dropdown. There is a checkbox for '薬品のみ' (Medicine only) and a '検索(S)' (Search) button. To the right of the search area are buttons for '終了(X)' (End) and 'CSV出力(O)' (CSV Output). The main area is titled '検索結果' (Search Results) and contains a table with the following columns: '対象日' (Target Date), 'レセ電算' (Reception Calculation), '薬価コード' (Drug Code), '名称' (Name), 'フリガナ' (Kana), '使用量' (Usage), and '単位' (Unit). The table is currently empty.

## 初回起動時の ORCA 設定

初回起動時または ORCA と接続ができない場合、ORCA の情報を登録する必要があります。手動で実行する場合は、メイン画面のツールメニューの ORCA 設定をクリックします。

ORCA の主サーバーの IP アドレス、患者番号の桁数、データベース接続の情報を指定します。指定が終わったら、保存をクリックします。

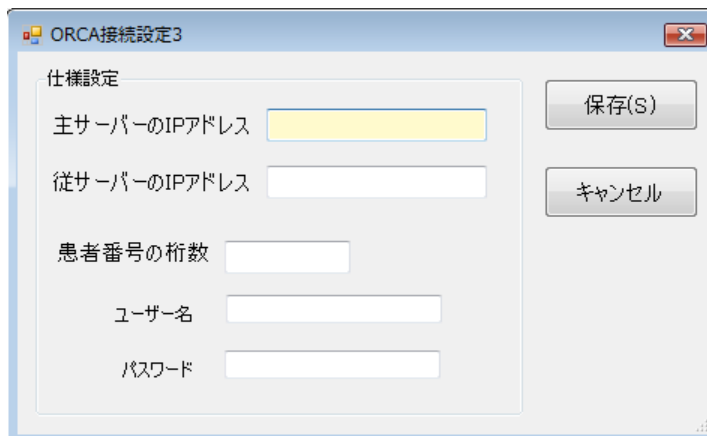

The screenshot shows the 'ORCA接続設定3' (ORCA Connection Settings 3) dialog box. It has a title bar with a close button. The dialog is divided into two main sections. The left section is titled '仕様設定' (Specification Settings) and contains five input fields: '主サーバーのIPアドレス' (Main Server IP Address), '従サーバーのIPアドレス' (Secondary Server IP Address), '患者番号の桁数' (Number of Digits of Patient Number), 'ユーザー名' (Username), and 'パスワード' (Password). The right section contains two buttons: '保存(S)' (Save) and 'キャンセル' (Cancel).

## オプションの設定

本システムの設定を行います。メイン画面のツールメニューからオプションをクリックします。

オプション

設定

区分  から   薬品のみ

命名規約  出力日付8桁  出力日付8桁+時刻6桁  
 指定名

出力先

参照(B)

出力項目

- 対象日
- レセ電算コード
- 薬価基準コード
- 名称
- フリガナ
- 使用量
- 単位

保存(S)

キャンセル

区分と薬品のみに関しては、ここで選択指定を行うと、初期表示として使用されます。  
薬剤を取得する場合は、区分を2 1 内服から2 3 外用で、薬品のみをチェックして下さい。

命名規約は、出力するCSV ファイル名を選択します。  
特定の名前で保存する場合は、拡張子まで指定を行って下さい。  
**同一のファイル名の場合、上書きされますので、ご注意ください。**

出力先は、ファイルを保存するフォルダーを指定します。  
参照ボタンをクリックすると、フォルダーを選択する画面が表示されます。


出力項目に関しては、必要でないものは、チェックを外して下さい。  
チェックのある項目のみ出力されます。

指定が終わったら、保存ボタンをクリックします。

## 検索の実行

各種条件を指定して検索ボタンをクリックします。対象日の指定は、必須です。

外来・入院別に集計する場合は、選択指定して下さい。特定の診療区分を集計する場合は、開始と終了を指定して下さい。薬品のみをチェックしないと、21内服から23外用を指定しても、用法等のデータも出力されてしまいます。

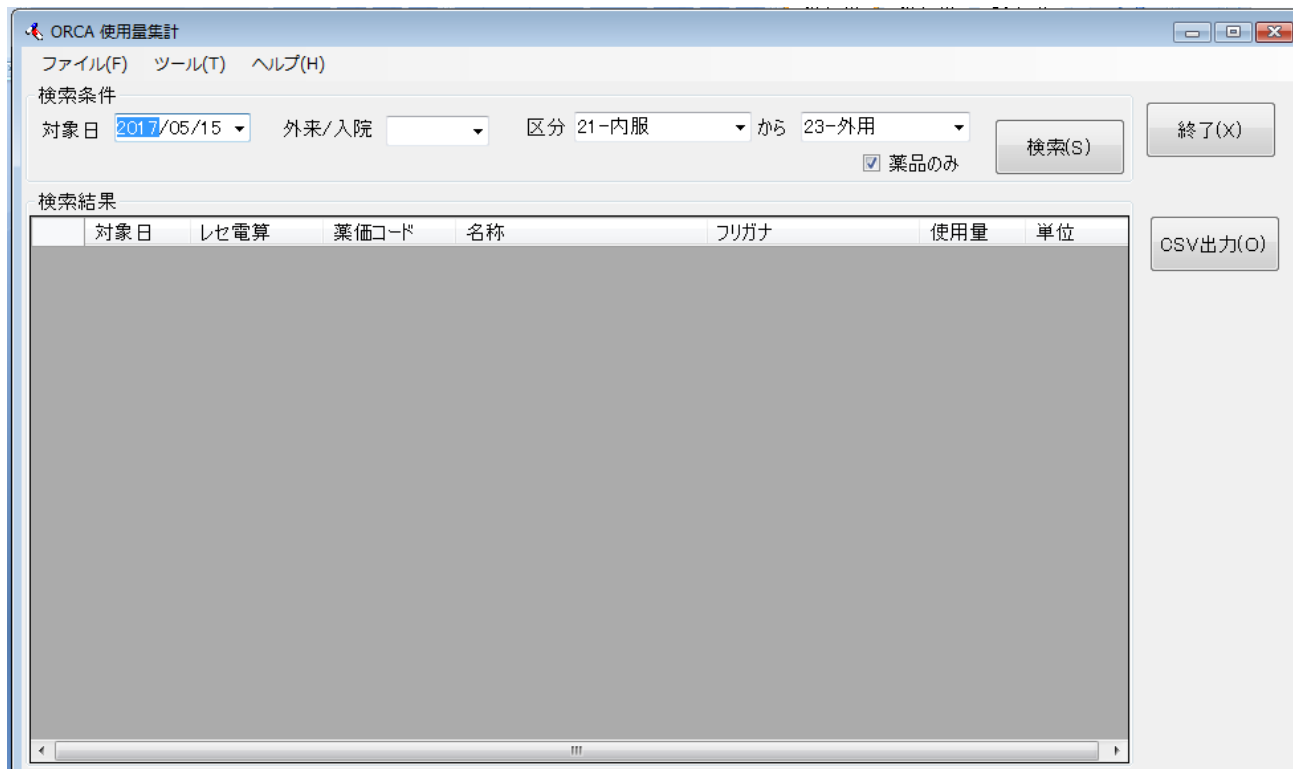

集計した結果です。レセ電算コード順に表示されます。

ORCA 使用量集計 - 試月中

ファイル(F) ツール(T) ヘルプ(H)

検索条件

対象日 2017/05/15 外来/入院 区分 21-内服 から 23-外用

薬品のみ

検索(S) 終了(X)

検索結果 61件

対象日	レセ電算	薬価コード	名称	フリガナ	使用量	単位
20170515	610409340	1179038F10...	リスパザール錠1mg	リスパザールジョウ1MG	168.00000	錠
20170515	610409341	1179038F20...	リスパザール錠2mg	リスパザールジョウ2MG	370.00000	錠
20170515	610412015	1129007F10...	アモバンテス錠7.5 7.5mg	アモバンテスジョウ7.5	14.00000	錠
20170515	610412101	2329012C11...	セルテブロン細粒10%	セルテブロンサイリュウ10...	28.00000	g
20170515	610451001	1179044F10...	ジブレキサ錠2.5mg	ジブレキサジョウ2.5MG	28.00000	錠
20170515	610451003	1179044F30...	ジブレキサ錠10mg	ジブレキサジョウ10MG	56.00000	錠
20170515	610453150	1172014F10...	レボトミン錠5mg	レボトミンジョウ5MG	14.00000	錠
20170515	610453151	1172014F21...	レボトミン錠25mg	レボトミンジョウ25MG	28.00000	錠
20170515	610462014	1179038S10...	リスパザール内用液1mg/...	リスパザールナイヨウエキ...	5.00000	mL
20170515	610463198	2344009F20...	マグミット錠330mg	マグミットジョウ330MG	244.00000	錠
20170515	611130039	1139004F10...	バレリン錠100mg	バレリンジョウ100MG	84.00000	錠
20170515	611130101	1139002F10...	テグレート錠200mg	テグレートジョウ200...	60.00000	錠
20170515	611170221	1179033F10...	テトラミド錠10mg	テトラミドジョウ10MG	60.00000	錠
20170515	611170436	1124020F40...	レキシタン錠5 5mg	レキシタンジョウ5	84.00000	錠
20170515	611170470	1124022F10...	ワイパックス錠0.5 0.5mg	ワイパックスジョウ0.5	263.00000	錠
20170515	611170471	1124022F20...	ワイパックス錠1.0 1mg	ワイパックスジョウ1.0	168.00000	錠
20170515	611170638	1179028F30...	インプロメン錠6mg	インプロメンジョウ6MG	30.00000	錠
20170515	611170727	1171001F20...	コントミン糖衣錠25mg	コントミントウイジョウ25...	56.00000	錠

CSV出力(O)

## 検索結果の CSV 出力

検索集計結果を CSV 形式（カンマ区切り）で、出力することが可能です。  
このファイルは、MS-EXCEL 等で読込んで、自由に加工することが可能です。

CSV 出力をクリックすると、設定に基づき、指定のファイル名で保存されます。

## 自動での CSV ファイルの出力

指定した時間や一定間隔で、データを集計し、ファイル出力を実行することが可能です。

タスク等のプログラムを起動できるツールに、本システムを登録して起動して下さい。  
起動の際のパラメータに、START(半角大文字)をしていると、自動的に集計し、CSV ファイルを出力後、終了します。

画面を最小で起動しますので、別の業務実行時は、一時画面が乱れる場合があります。


## エラーに関して

本システムは、十分なテストのもとに出荷しておりますが、想定しないケースでエラーが発生することもあります。万一エラーが発生した場合は、そのエラーメッセージや行っていた操作等を記録して、お問い合わせ下さい。内容をお聞きし、対応を行います。


## 最新バージョンの提供

最新のバージョンを確認する場合は、ヘルプメニューのバージョンアップ確認をクリックします。

最新のバージョンが提供されていない場合は、次の表示があります。

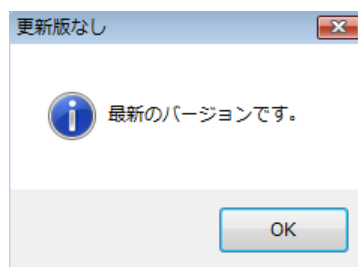

最新のバージョンが提供されている場合は、更新確認の画面が表示されますので、必要時は、はいをクリックします。

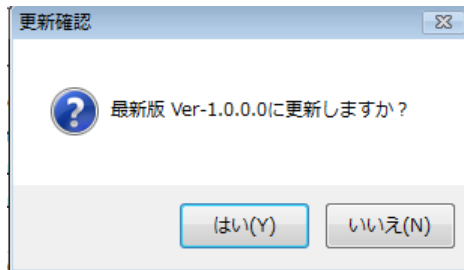

## その他

機能の追加等に関しては、随時受け付けております。内容によって、別途有料で対応の場合もありますが、検討して対応をご連絡します。

以下余白