

クラウド版 ORCA 患者情報取得

Ver-01.00.02.00

和幸システム株式会社

はじめに

クラウド版 ORCA 患者情報取得(以下、本システムと略す)は、外部システムで利用できるように ORCA クラウド版より、指定した患者の情報を CSV ファイルに出力するシステムです。

外部システムから引数に患者番号を指定し、本システムを起動すると、該当患者の情報を出力します。

起動と終了

起動は、プログラムメニューから、クラウド版 ORCA 患者情報取得を起動して下さい。

終了は、メイン画面の終了ボタンをクリックして下さい。

設定の変更時以外は、単独起動することはありません。

ライセンスの登録

本システムは、ライセンス登録を行わないと、一定期間経過後は、使用できなくなります。

次の画面が表示されたら、オンライン申請をクリックして下さい。

試用する場合は、あとで登録をクリックして業務を開始して下さい。

ライセンスを登録する場合は、ライセンス登録欄に指定の内容を入力後、ライセンス登録をクリックして下さい。

オンライン申請の画面です。インターネット経由で登録画面が表示されますので、必要事項を記入して、送信ボタンをクリックして下さい。

ライセンス登録のご案内メールをお送りしますので、その内容に従って下さい。

クラウド版ORCA 患者情報取得 ユーザー申請


下記のフォームに入力後、送信ボタンをクリックして申請下さい。購入方法のメールお送り致します。
入金確認後、購入パスワードを送付致します。
個人情報に関しては、当社内で厳重管理し、第三者に公表することはありません。

尚、フリーメールのアドレスでの申請は、お断りしております。

必要項目を入力し、送信ボタンを押して下さい (※の部分は必須項目)		
ユーザー情報 ※	KD68A04A90240Q	(このまま変更しないで下さい)
ふりがな ※ 全角ひらがなで指定		
ご担当者氏名(漢字)※		
E-Mailアドレス ※ 全て半角で指定		
医療機関名※		
所属		

メイン画面

本システムのメイン画面です。終了ボタンをクリックすると業務を終了します。

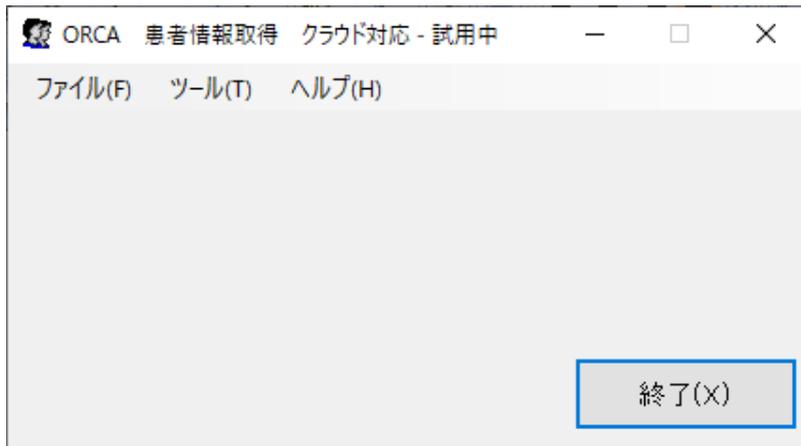

初回起動時の ORCA API 設定

初回起動時または ORCA と接続ができない場合、ORCA の情報を登録する必要があります。
メイン画面のツールメニューの ORCA API 設定をクリックします。

オンプレ版 ORCA・WebORCA は、ホスト名に IP アドレス、ポート番号は 8000、ユーザー名は ormaster、パスワードを指定します

クラウド版は、ホスト名、ポート番号は 443、ユーザー名は U から始まる ORCAMID、パスワードは API キーです。P12 証明書ファイルと証明書のパスワードを指定して下さい。

API 監視間隔に関しては、本システムでは使用していませんが 1 を指定して下さい。

WebORCA オンプレ・クラウド版の場合は、WebORCA で運用にチェックして下さい。



ORCA_APIの設定

仕様設定

ホスト名

ポート番号

ユーザー名
※ WebORCAクラウドの場合、ORCAMO ID

パスワード
※ WebORCAクラウドの場合、APIキー

API監視間隔 秒 (1-60)

クラウド関連設定

証明書ファイル(PKCS#12形式)

パスワード

WebORCAで運用する


保存(S)

キャンセル

参照(B)

オプションの設定

結果 CSV ファイル関連の設定を行います。
ツールメニューのオプションをクリックします。

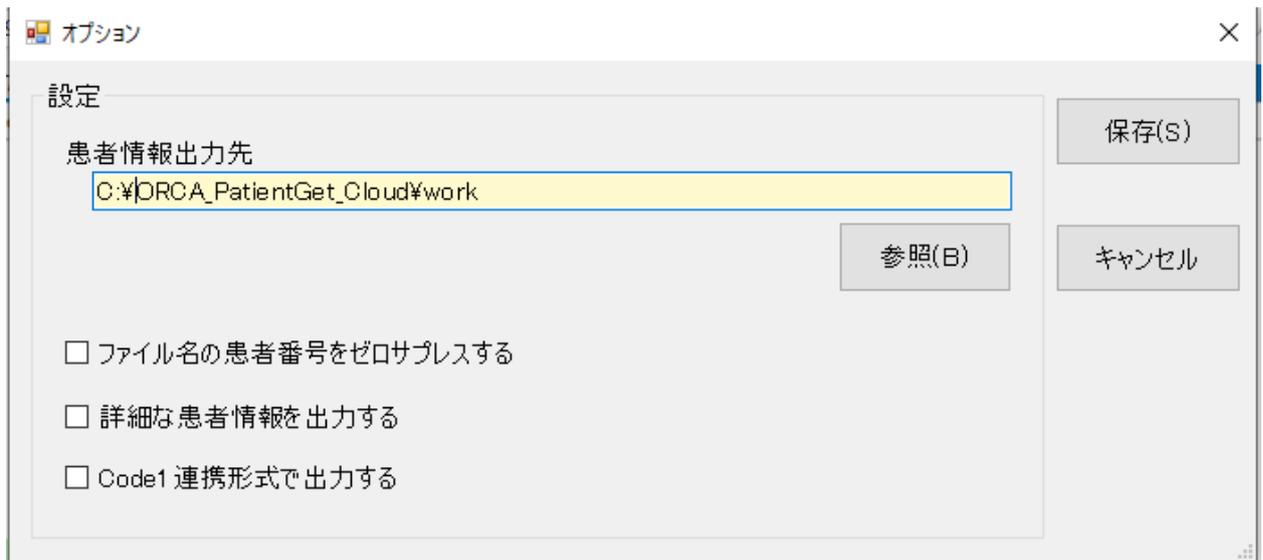

患者情報出力先は、患者情報ファイルが出力されるフォルダーです。

出力するファイル名は、患者番号.txt ですが、ファイル名の患者番号をゼロサプレスするにチェックを
すると、先行する0がカットされます。

例) 患者番号が、000045 ゼロサプレスの場合、45.txt なしは、000045.txt

詳細な患者情報を出力するに、チェックすると、

<https://www.orca.med.or.jp/receipt/tec/api/patientget.html>のレスポンス一覧6-45まで出力され
ます。

チェックが無い場合は、

患者コード、患者氏名、患者カナ、生年月日、性別、自宅郵便番号、住所、番地、電話番号、連絡先電話番号
が出力されます。

CODE1 連携形式で出力の場合は、連携用の形式で出力されます。

本システムを利用しての患者情報取得

本システムを利用して患者情報を取得する場合は、希望する患者番号を引数に指定し、起動して下さい。

例) 患者 10 のデータが希望の場合 ORCA_PatientGet_Cloud.exe△10 ※参加は半角スペース

**本システムのインストールフォルダーの ORCA_PatientGet_Cloud_start.bat を実行するとテストが
可能です。**

出力フォルダーにデータが 10.txt で出力されます。

<通信等のエラーの場合>

ファイル内の氏名の位置に、エラー内容が表示されます。

<患者未登録の場合>

ファイル内の氏名の位置に、【患者番号がありません】が表示されます。

<正常に取得できた場合>

指定されたフォーマットでカンマ区切りでデータが出力されます。


エラーに関して

本システムは、十分なテストのもとに出荷しておりますが、想定しないケースでエラーが発生することもあります。万一エラーが発生した場合は、そのエラーメッセージや行っていた操作等を記録して、お問い合わせ下さい。内容をお聞きし、対応を行います。

最新バージョンの提供

最新のバージョンを確認する場合は、ヘルプメニューのバージョンアップ確認をクリックします。

最新のバージョンが提供されていない場合は、次の表示があります。

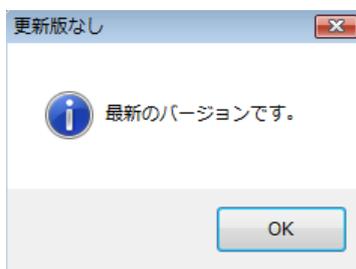

最新のバージョンが提供されている場合は、更新確認の画面が表示されますので、必要時は、はいをクリックします。



その他

機能の追加等に関しては、随時受け付けております。内容によって、別途有料で対応の場合もありますが、検討して対応をご連絡します。